

## GripLock Finger™

Brugsanvisning  
Klasse 1 protese'  
PPF101 | Første generation



**Producent**



**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Fremstillet i USA

**Autoriseret repræsentant**




**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

DANSK



medicinsk udstyr

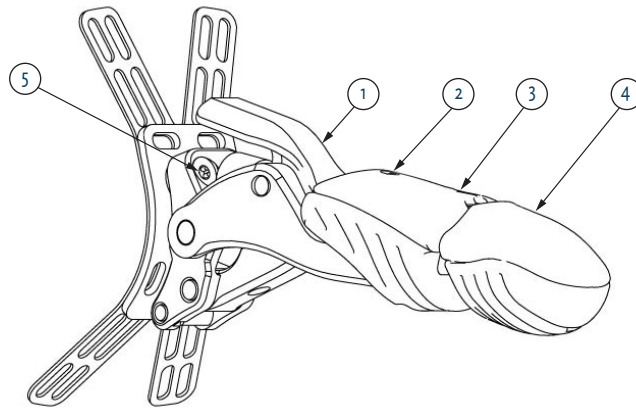

Figur: A

## LISTE OVER DELE

Figur A:

- |                        |                                |                 |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ① Pal (udløserhåndtag) | ② Beklædningsfastgørelsesskrue | ③ P2-beklædning |
| ④ GLF Tip              | ⑤ Ankerfastgørelsesskrue       |                 |

## PRODUKTBESKRIVELSE

**GripLock Finger** er en passiv, låsende, mekanisk protese, der har til formål at genoprette håndfunktionen hos patienter med komplette fingeramputationer eller medfødte anomalier. **GripLock Finger** erstatter de manglende fingre for at give brugerne mulighed for at genvinde brugsevne og funktionelle grebsmønstre. Protesen genopretter kraftmodstand og længde for de berørte fingre, og den hjælper også med at beskytte amputationsstedet og modstå smertefulde kræfter for enden af den eller de resterende fingre. **GripLock Finger** fungerer som en positionerbar, låsende, mekanisk finger. Når den er bøjet, er der to metoder til at returnere den til sin neutrale position: (1) ved at trykke på palen placeret på ryggen (*figur A, 1*) på **GripLock Finger** eller (2) ved fuldt ud at bøje **GripLock Finger**, indtil nulstillingspositionen er nået, og derefter lade den slippe. **GripLock Finger**-enheder er beregnet til at blive brugt sammen med en specialfremstillet sokkel og til at blive monteret på en patient af en certificeret protesetekniker.

## Anbefalinger for brug

Når du bruger **GripLock Finger**, anbefales det gradvist at vænne sig til fuldtidsbrug. Dette vil bidrage til at forhindre skader i muskler der måske ikke er blevet udnyttet optimalt indtil dette tidspunkt.

Erhvervs-, rehabiliterings- eller håndterapi anbefales, efter at du har modtaget enheden til muskelforstærkning og optimal funktion af enheden.

## Forsigtig

- For patienter med følsomhed anbefales det at bruge **GripLock Finger**, iht. hvordan den tolereres.
- Hvis der opstår rødme eller irritation på huden, skal du reducere brugen af enheden.
- Hvis der opstår rødme eller ubehag, skal du straks stoppe brugen af enheden og kontakte din protesetekniker.


*Alvorlige hændelser skal indberettes til Naked Prosthetics og relevante offentlige myndigheder, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.*

## Vedligeholdelse af enheden

- GripLock Finger er vandtæt, bestandig over for snavs, kemikalier og varme og bygget til brug.
- Langvarig udsættelse for stærke opløsningsmidler kan beskadige lakerede overflader.
- Regelmæssigt arbejde med affedtningsmidler kan fjerne smørelsen fra hængslerne.
- Kontakt din protesetekniker for service eller udskiftning af komponenter.
- For at sikre lang levetid for GripLock Finger skal der anvendes en let, mineralisk olie, der er sikker at anvende som fødevarer til følgende steder:

Figur B:

- ① Fjeder
- ② Pal-interface
- ③ Palhængsel
- ④ Tænder

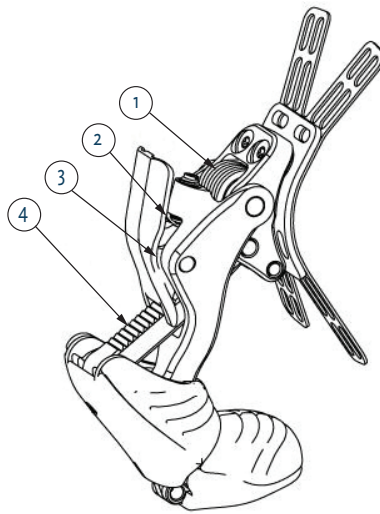

*\*BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager må hængsler kun demonteres af enhedsfabrikanten.*

## Vedligeholdelse og rengøring

- Langvarig udsættelse for stærke opløsningsmidler kan beskadige lakerede overflader og fjerne smørelse på hængsler.
- Skyl med ferskvand efter brug i saltvand.
- Rengør enheden med varmt vand og mildt rengøringsmiddel efter behov. Dup forsigtigt enheden tør, eller lad den lufttørre.
- Fjern snavs eller skidt fra enheden ved hjælp af en gammel tandbørste eller trykluft, hvis det ønskes.
- Må IKKE maskinvaskes. Må IKKE tørres i tørretumbler.

## Garanti

Naked Prosthetics tilbyder som standard 1 års garanti (fra afsendelsesdato) på GripLock Finger-enhedens mekaniske funktion. Kontakt Naked Prosthetics for yderligere muligheder for udvidet garanti.

## Ændring i ydeevne

I tilfælde af ændring i en enheds ydeevne skal du altid ophøre med at bruge enheden og kontakte din klinik.



**Advarsel: Brug ikke enheden, hvis kontakt mellem enheden og patientens hud forårsager smerte, overdreven slid eller blødning.**

## Indberetning af alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med enheden skal indberettes til fabrikanten og de relevante myndigheder.

---

## Bortskaffelse

Udstyret og emballagen skal bortskaffes i henhold til gældende lokal eller national miljølovgivning.

---

## Ansvar

Naked Prosthetics fraskriver sig ethvert ansvar, hvis:

- udstyret ikke er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med brugsanvisningen
- udstyret er blevet kombineret med dele fra andre fabrikanter
- udstyret er blevet brugt uden for anbefalet brugstilstand, anvendelse eller område.

Få mere at vide på [npdevices.com](http://npdevices.com)