


GripLock Finger™

Mode d'emploi
Dispositif prothétique de classe 1
PPF101 | Première génération



Fabricant

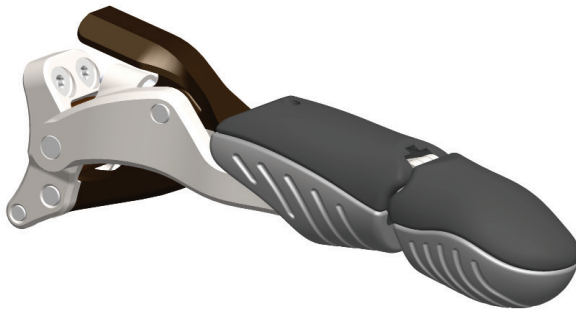

Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Fabriqué aux États-Unis

Représentant agréé



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

FRANÇAIS



Dispositif médical

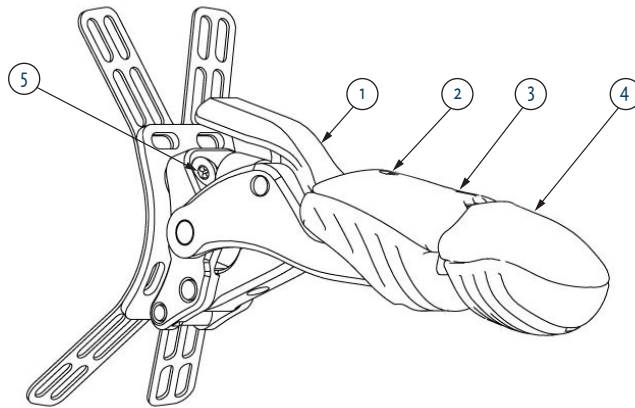


Diagramme A :

LISTE DES PIÈCES

Diagramme A :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ① Cliquet (levier de déverrouillage) | ② Vis de fixation du carénage | ③ Carénage P2 |
| ④ Extrémité du GLF | ⑤ Vis de fixation de l'ancrage | |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **GripLock Finger** est une prothèse mécanique verrouillable et passive qui vise à restaurer la fonction de la main chez les patients ayant subi une amputation complète du doigt ou présentant des anomalies congénitales. Le **GripLock Finger** remplace les doigts absents pour permettre aux utilisateurs de retrouver une préhension et des schémas de préhension fonctionnels. En restaurant la force d'opposition et la longueur des doigts concernés, il contribue également à protéger le site de l'amputation et à résister aux forces douloureuses à l'extrémité du moignon. Le **GripLock Finger** fonctionne comme un doigt mécanique verrouillable et positionnable. Une fois plié, il existe deux méthodes pour le remettre en position neutre : (1) en appuyant sur le cliquet situé sur le côté dorsal (*Diagramme A, 1*) du **GripLock Finger** ou (2) en pliant complètement le **GripLock Finger** jusqu'à atteindre la position de réinitialisation, puis en le relâchant. Les dispositifs **GripLock Finger** sont conçus pour être utilisés en association avec une emboîture fabriquée sur mesure et être ajustés sur un patient par un prothésiste certifié.

Recommandations d'utilisation

Il est recommandé d'utiliser progressivement le **GripLock Finger**, jusqu'à son utilisation de façon continue. Cela permet d'éviter les blessures dues à une utilisation excessive des muscles qui ont peut-être été peu utilisés jusqu'à ce stade.

Une ergothérapie, une rééducation ou une thérapie de la main est recommandée après la réception de votre dispositif pour renforcer vos muscles et optimiser le fonctionnement du dispositif.

Précaution

- Il est recommandé aux patients sensibles d'utiliser le **GripLock Finger** selon leur tolérance.
- Si des rougeurs ou des irritations apparaissent sur votre peau, réduisez l'utilisation du dispositif.
- Si les rougeurs persistent ou si vous ressentez une gêne, cessez immédiatement d'utiliser le dispositif et contactez votre prothésiste.


Les incidents graves doivent être signalés à Naked Prosthetics et aux autorités gouvernementales compétentes de l'endroit où l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Maintenance du dispositif

- Le GripLock Finger est étanche, résistant à la saleté, aux produits chimiques et à la chaleur et conçu pour être utilisé.
- Une exposition prolongée à de puissants solvants peut endommager les surfaces peintes.
- L'utilisation régulière de dégraissants peut enlever la lubrification des charnières.
- Contactez votre prothésiste pour faciliter l'entretien ou le remplacement des composants.
- Pour assurer la longévité du GripLock Finger, appliquez une huile minérale légère et sans danger pour les aliments aux endroits suivants :

Diagramme B :

- ① Ressort
- ② Interface du cliquet
- ③ Charnière à cliquet
- ④ Denture

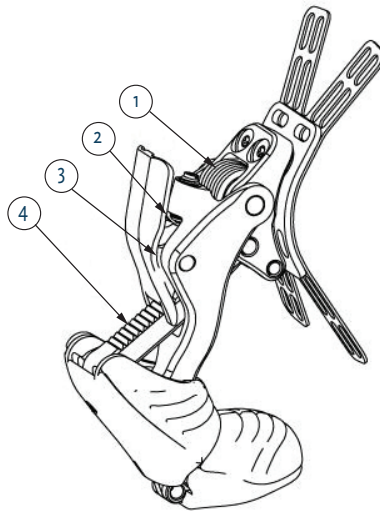

* REMARQUE : pour des raisons de sécurité, les charnières ne doivent être démontées que par le fabricant du dispositif.

Entretien et nettoyage

- Une exposition prolongée à de puissants solvants peut endommager les surfaces peintes et enlever la lubrification des charnières.
- Rincez à l'eau douce après utilisation en eau salée.
- Nettoyez le dispositif avec de l'eau chaude et un détergent doux si nécessaire. Séchez-le en le tapotant ou à l'air libre.
- Si vous le souhaitez, retirez la saleté ou la poussière du dispositif à l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'un appareil de nettoyage à air comprimé.
- NE PAS laver le dispositif en machine et NE PAS le mettre dans le sèche-linge.

Garantie

Naked Prosthetics offre une garantie standard d'un an (à compter de la date d'expédition) sur le fonctionnement mécanique du GripLock Finger. Veuillez contacter Naked Prosthetics pour obtenir des options supplémentaires pour l'extension de la garantie.

Modification des performances

En cas de modification des performances d'un dispositif, cessez de l'utiliser et contactez votre clinique.



Avertissement : n'utilisez pas le dispositif si le contact entre le dispositif et la peau du patient provoque des douleurs, une abrasion excessive ou des saignements.

Rapport d'incident grave

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Élimination

Le dispositif et son emballage doivent être jetés conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

Responsabilité

Naked Prosthetics décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- le dispositif n'est pas entretenu conformément au mode d'emploi ;
- le dispositif est assemblé avec des composants provenant d'autres fabricants ;
- le dispositif est utilisé en dehors des conditions d'utilisation, de l'application ou de l'environnement recommandés.

Pour plus d'informations, consultez npdevices.com