



# GripLock Finger™

Gebrauchsanweisung  
Prothese der Klasse 1  
PPF101 | Erste Generation

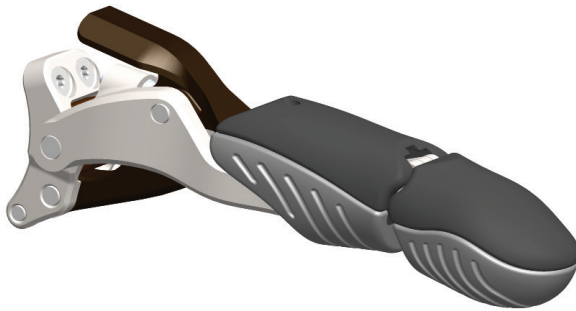

Hersteller	EU-Bevollmächtigter		
 <p><b>Naked Prosthetics</b> 408 Olympia Ave NE Olympia, WA 98501 USA +1 (360) 915-9724 Hergestellt in den USA</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="542 2011 667 2110">EC</td><td data-bbox="667 2011 791 2110">REP</td></tr></table> <p>EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands</p>	EC	REP
EC	REP		

DEUTSCH



Medizinprodukt

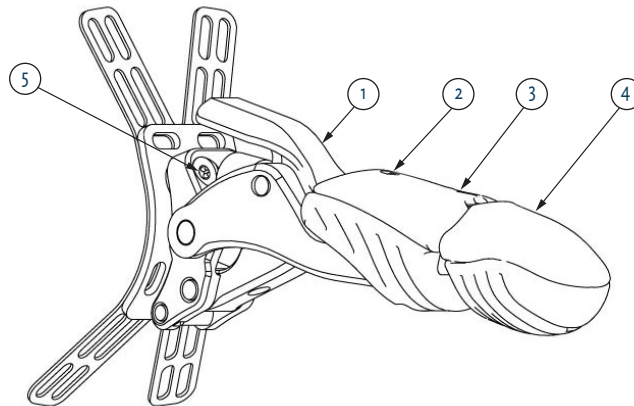


Abbildung: A

## LISTE DER KOMPONENTEN

Abbildung A:

- |                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| ① Sperrklinke (Entriegelungshebel) | ② Befestigungsschraube der Verkleidung | ③ P2 Verkleidung |
| ④ GLF-Spitze                       | ⑤ Ankerbefestigungsschrauben           |                  |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GripLock Finger** ist eine passive, arretierbare mechanische Prothese, zur Wiederherstellung der Handfunktion von Patienten mit vollständigen Fingeramputationen oder angeborenen Anomalien. Der **GripLock Finger** ersetzt den fehlenden Finger und ermöglicht den Anwendern, Greifbewegungen und funktionelle Greifmuster wiederzuerlangen. Die Prothese stellt den Kraftwiderstand und die Länge der betroffenen Finger wieder her, schützt dadurch die Amputationsstelle und verhindert Schmerzen am Ende des Stumpfes. Der **GripLock Finger** funktioniert als positionierbarer, arretierbarer, mechanischer Finger. Nach der Beugung gibt es zwei Methoden, um ihn wieder in die neutrale Position zu bringen: (1) durch Drücken der Sperrklinke an der Oberseite (dorsal) des GripLock Fingers (*Abbildung A, 1*) oder (2) durch vollständiges Beugen des **GripLock Fingers** bis zur Rückstellposition, sodass die Sperre gelöst wird. Die **GripLock Finger** sind für die Verwendung in Verbindung mit einem individuell gefertigten Prothesenschaft vorgesehen und müssen von einem zertifizierten Orthopädietechniker für den Patienten angepasst werden.

## Empfehlungen für die Anwendung

Zur Eingewöhnung an den GripLock Finger wird empfohlen, die Tragedauer allmählich bis zur dauerhaften Verwendung zu erhöhen. Dadurch verhindern Sie Überlastungsverletzungen in Muskeln, die bisher möglicherweise nicht häufig beansprucht wurden.

Nach Erhalt der Prothese wird zur Muskelstärkung und optimalen Funktion der Prothese eine Ergo-, Rehabilitations- oder Handtherapie empfohlen.

## Vorsicht

- Patienten mit stärkerer Empfindlichkeit wird empfohlen, den GripLock Finger so lange zu tragen, wie sie diesen vertragen.
- Wenn Rötungen oder Irritationen auf der Haut auftreten, reduzieren Sie die Anwendung bzw. die Tragedauer der Prothese.
- Wenn die Rötung anhält oder Beschwerden auftreten, nehmen Sie die Prothese sofort ab und tragen Sie sie nicht mehr. Wenden Sie sich an Ihren Orthopädietechniker.


*Schwerwiegende Ereignisse müssen Naked Prosthetics und den zuständigen Behörden des Landes, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.*

## Wartung der Prothese

- Der GripLock Finger ist wasserdicht, schmutz-, chemikalien- und hitzebeständig und für das Tragen konzipiert.
- Längerer Kontakt mit starken Lösungsmitteln kann zu Schäden an den lackierten Oberflächen führen.
- Regelmäßiges Arbeiten mit Entfettungsmitteln kann das Schmiermittel von den Scharnieren entfernen.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung bei der Wartung der Prothese oder zum Austausch von Komponenten an Ihren Orthopädietechniker.
- Um die Langlebigkeit des GripLock Fingers zu gewährleisten, tragen Sie an folgenden Stellen ein lebensmittelechtes, leichtes Mineralöl auf:

Abbildung B:

- ① Feder
- ② Sperrklinken-Interface
- ③ Sperrlinkenscharnier
- ④ Rastereinheit

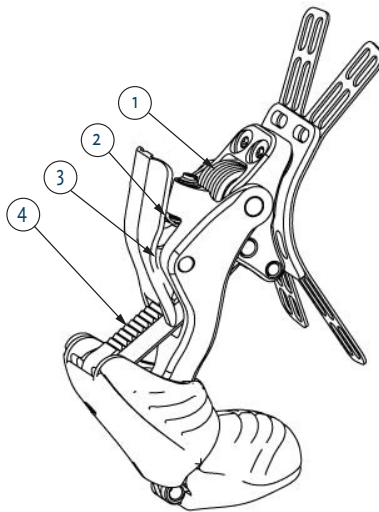

\* **HINWEIS:** Scharniere dürfen aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller der Prothese demontiert werden.

## Pflege und Reinigung

- Längerer Kontakt mit starken Lösungsmitteln kann zu Schäden an lackierten Oberflächen führen und Gelenkschmierung entfernen.
- Spülen Sie die Prothese mit klarem Wasser ab, wenn sie in Salzwasser getragen wurde.
- Reinigen Sie die Prothese bei Bedarf mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Prothese an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Tuch trocken.
- Entfernen Sie Schmutz gegebenenfalls mit einer alten Zahnbürste oder mit Druckluft von der Prothese.
- NICHT in der Spül- oder Waschmaschine reinigen; NICHT in den Trockner legen.

## Gewährleistung

Naked Prosthetics bietet eine einjährige Standardgarantie (ab Datum des Versands) auf die mechanische Funktion des GripLock Fingers.

Bitte wenden Sie sich an Naked Prosthetics, wenn Sie Informationen zu zusätzlichen, erweiterten Garantieoptionen erhalten möchten.

## Veränderung der Leistung

Wenn Sie Leistungsveränderungen an der Prothese feststellen, verwenden Sie die Prothese nicht mehr und kontaktieren Sie Ihre Klinik.



**Warnung:** Verwenden Sie die Prothese nicht, wenn der Kontakt zwischen Prothese und Haut des Patienten Schmerzen, übermäßige Abschürfungen oder Blutungen verursacht.

## Meldung schwerwiegender Ereignisse

Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und den zuständigen Behörden gemeldet werden.

---

## Entsorgung

Das Produkt und die Verpackung müssen gemäß den geltenden lokalen oder nationalen Umweltvorschriften entsorgt werden.

---

## Haftung

Naked Prosthetics übernimmt keine Haftung, wenn:

- das Produkt nicht gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung gewartet wird.
- das Produkt mit Komponenten anderer Hersteller montiert wird.
- das Produkt nicht gemäß den empfohlenen Anwendungsbedingungen oder nicht für die empfohlene Anwendung bzw. Umgebung verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [npdevices.com](http://npdevices.com).