

GripLock Finger™

Bruksanvisning
Klasse 1 proteseenhet
PPF101 | Første generasjon



Produsent



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Produsert i USA

Autorisert representant




EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

NORSK



Medisinsk utstyr

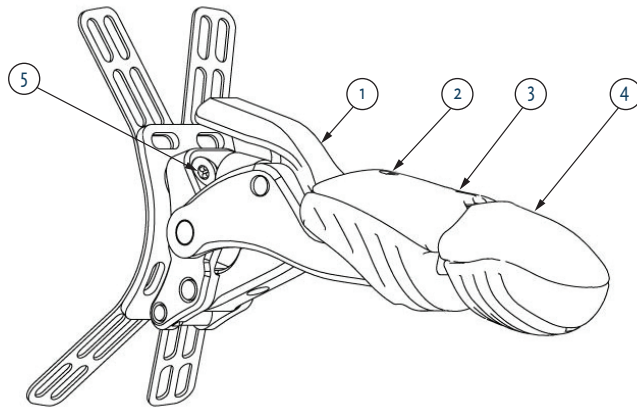

Figur: A

LISTE MED DELER

Figur A:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| ① Sperrehake (utløerspak) | ② Festeskruer for føring | ③ P2 føring |
| ④ GLF-tupp | ⑤ Festeskruer til anker | |

PRODUKTBEKRIVELSE

GripLock-fingeren er en passiv, låsende, mekanisk protese som tar sikte på å gjenopprette håndfunksjonen til pasienter med fullstendige fingeramputasjoner eller medfødte avvik. **GripLock**-fingeren erstatter de fraværende fingrene, slik at brukere får tilbake gripeevne og funksjonelle gripemønstre. Den gjenoppretter kraftmotstand og lengde til de berørte fingrene og bidrar også til å beskytte amputasjonsstedet og motstå smertefulle krefter på slutten av residuum. **GripLock**-fingeren fungerer som en posisjonerbar, låsende, mekanisk finger. Når den er bøyd, er det to måter den kan returneres til sin nøytrale posisjon: (1) ved å trykke ned sperrehaken på den dorsale siden (*figur A, 1*) av **GripLock**-fingeren, eller (2) ved å bøye **GripLock**-fingeren helt til tilbakestillt posisjon er nådd før du deretter lar den frigjøres. **GripLock**-fingrene er ment for bruk sammen med en skreddersydd kontakt og skal plasseres på pasienten av en sertifisert protesecliniker.

Anbefalinger for bruk

Ved bruk av **GripLock**-fingeren anbefales en gradvis oppbygging til fulltidsbruk. Dette vil bidra til å forhindre overbruksskader i muskler som kan ha vært brukt for lite frem til dette punktet.

Yrkes-, rehabiliterings- eller håndterapi er anbefalt etter å ha mottatt enheten for muskelstyrking og optimal enhetsfunksjon.

Forsiktig

- For pasienter med sensitivitet anbefales det å bruke **GripLock**-fingeren som tolerert.
- Hvis rødhet eller irritasjon vises på huden din, må du redusere bruken av enheten din.
- Hvis rødhet vedvarer eller ubehag oppstår, stopp bruken av enheten umiddelbart og kontakt ortopediteknikeren din.


Alvorlige hendelser bør rapporteres til Naked Prosthetics og passende offentlige myndigheter der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Vedlikehold av enhet

- GripLock-fingeren er vannsikker, skitt-, kjemikalie- og varmebestandig og bygget for bruk.
- Langvarig eksponering for sterke løsemidler kan skade malte overflater.
- Regelmessig arbeid med avfettingsmidler kan fjerne smøring fra hengsler.
- Kontakt ortopediteknikeren din for vedlikehold eller utskifting av komponenter.
- For å sikre lang levetid til GripLock-fingeren, påfør en matsikker, lett mineralolje på følgende steder:

Figur B:

- ① Fjær
- ② Kontaktflate for sperrehake
- ③ Hengsel for sperrehake
- ④ Tenner

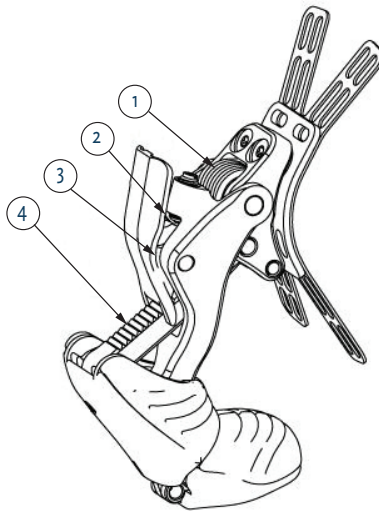

* MERK: Av sikkerhetsmessige årsaker bør hengsler kun demonteres av enhetsprodusenten.

Vedlikehold og rengjøring

- Langvarig eksponering for sterke løsemidler kan skade malte overflater og fjerne smøringen fra hengslene.
- Skyll med ferskvann etter bruk i saltvann.
- Rengjør enheten med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel etter behov. Tørk forsiktig eller lufttørk.
- Fjern smuss eller skitt fra enheten med en gammel tannbørste eller trykkluft hvis det er ønskelig.
- IKKE maskinvask. IKKE plasser i tørketrommel.

Garanti

Naked Prosthetics tilbyr en standard 1-års garanti (fra forsendelsesdato) på den mekaniske funksjonen til GripLock-fingeren. Kontakt Naked Prosthetics for ekstra, utvidede garantialternativer.

Endringer i ytelse

Ved en endring i enhetens ytelse, må du alltid avslutte bruken av enheten og ta kontakt med legekantoret ditt.



Advarsel: Enheten må ikke brukes hvis kontakt mellom enheten og pasientens hud forårsaker smerte, overdreven slitasje eller blødning.

Rapportering om alvorlig hendelse

Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.

Avhending

Enheten og emballasjen må avhendes i henhold til respektive lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Ansvar

Naked Prosthetics påtar seg ikke ansvar for følgende:

- Enheter som ikke er vedlikeholdt som instruert i bruksanvisningen.
- Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
- Enheter som er brukt utenfor anbefalt brukstilstand, applikasjon eller miljø

For mer informasjon: [besøk npdevices.com](https://www.npdevices.com)