


## GripLock Finger™

Instrucciones de uso  
Dispositivo protésico de clase 1  
PPF101 | Primera generación



**Fabricante**

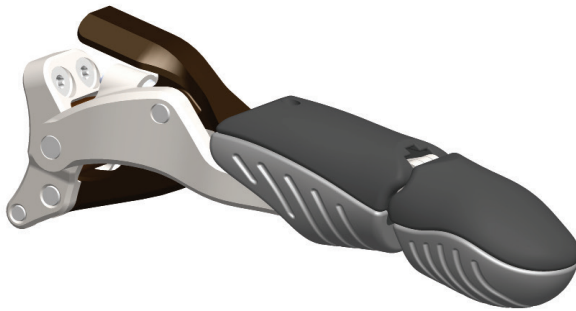

**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Fabricado en Estados Unidos

**Representante autorizado**



**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ESPAÑOL



Dispositivo médico

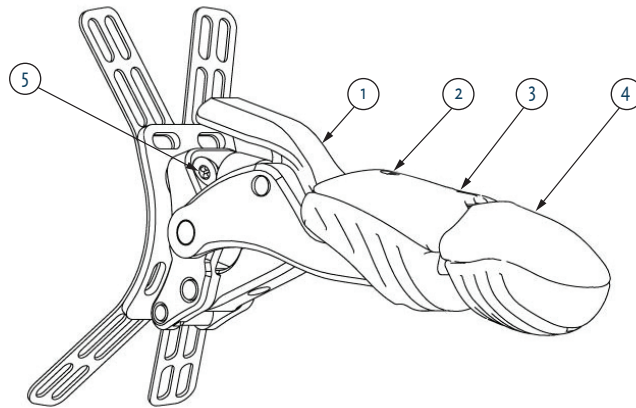


Figura: A

## LISTA DE PIEZAS

Figura A:

- |                                     |                                     |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ① Trinquete (palanca de desbloqueo) | ② Tornillo de fijación del carenado | ③ Carenado P2 |
| ④ Punta GLF                         | ⑤ Tornillos de fijación del anclaje |               |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**GripLock Finger** es una prótesis mecánica pasiva con bloqueo que pretende devolver la función de la mano a pacientes con amputaciones completas de dedos o anomalías congénitas. **GripLock Finger** sustituye a los dedos ausentes para permitir a los usuarios recuperar la prehensión y los patrones de presión funcionales. Al restaurar la oposición de fuerzas y la longitud de los dedos afectados, también ayuda a proteger el lugar de la amputación y a resistir las fuerzas dolorosas al final del muñón. **GripLock Finger** funciona como un dedo mecánico posicionable y bloqueable. Una vez flexionado, existen dos métodos para devolverlo a su posición de reposo: (1) presionando el trinquete situado en el lado dorsal (*Figura A, 1*) de **GripLock Finger** o (2) flexionando completamente **GripLock Finger** hasta alcanzar la posición de reajuste y dejando que se libere. La finalidad de **GripLock Finger** es que se utilice junto con un encaje fabricado a medida y que un técnico ortopédico certificado realice el ajuste en el paciente.

## Recomendaciones de uso

Al utilizar **GripLock Finger**, se recomienda llegar gradualmente al uso a tiempo completo. De este modo se evitarán lesiones provocadas por un uso excesivo en músculos que hasta ese momento podían haberse utilizado de forma insuficiente.

Se recomienda realizar terapia ocupacional, de rehabilitación o manual después de recibir su dispositivo con el fin de fortalecer los músculos y conseguir un funcionamiento óptimo del mismo.

## Precaución

- En el caso de pacientes con sensibilidad, se recomienda utilizar **GripLock Finger** en la medida de su tolerancia.
- Si se produce un enrojecimiento o irritación en la piel, reduzca el uso del dispositivo.
- Si persiste el enrojecimiento o aparecen molestias, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con su técnico ortopédico.


*Cualquier incidente de carácter grave debe ser comunicado a Naked Prosthetics y a las autoridades gubernamentales competentes del lugar en el que resida la persona usuaria y/o paciente.*

## Mantenimiento del dispositivo

- GripLock Finger es impermeable, resistente a la suciedad, a los productos químicos y al calor, y está diseñado para ser utilizado.
- La exposición prolongada a disolventes agresivos puede dañar las superficies pintadas.
- El trabajo regular con desengrasantes puede eliminar la lubricación de las bisagras.
- Póngase en contacto con su técnico ortopédico para facilitar el mantenimiento o la sustitución de los componentes.
- Para garantizar la longevidad de GripLock Finger, aplique un aceite mineral suave apto para alimentos en los siguientes puntos:

Figura B:

- ① Muelle
- ② Interfaz del trinquete
- ③ Bisagra del trinquete
- ④ Dientes

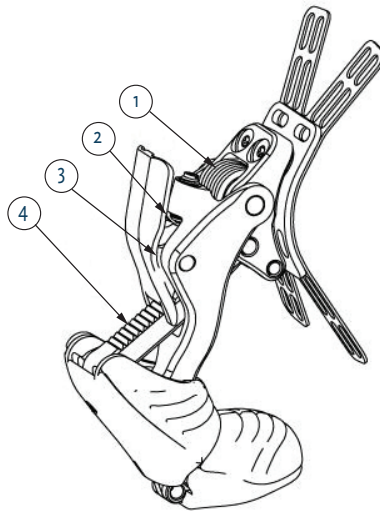

\* NOTA: Por razones de seguridad, las bisagras únicamente deben ser desmontadas por el fabricante del dispositivo.

## Cuidado y limpieza

- La exposición prolongada a disolventes agresivos puede dañar las superficies pintadas y eliminar la lubricación de las bisagras.
- Después de utilizarlo en agua salada, enjuáguelo con agua dulce.
- Limpie el dispositivo con agua tibia y detergente suave cuando sea necesario. Séquelo con cuidado o al aire.
- Limpie la suciedad o el polvo del dispositivo utilizando un cepillo de dientes viejo o aire comprimido si lo desea.
- NO se debe lavar a máquina NI meter en la secadora.

## Garantía

Naked Prosthetics ofrece una garantía estándar de 1 año (a partir de la fecha de envío) sobre el funcionamiento mecánico de GripLock Finger. Póngase en contacto con Naked Prosthetics para obtener información sobre otras opciones de garantía ampliada.

## Alteración de las prestaciones

En caso de alteración de las prestaciones de un dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y póngase en contacto con su clínica.



**Advertencia:** No utilice el dispositivo si su contacto con la piel del paciente provoca dolor, abrasión excesiva o hemorragia.

## Notificación de incidentes graves

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a las autoridades pertinentes.

---

## Eliminación

El dispositivo y el embalaje deben eliminarse con arreglo a la normativa medioambiental local o nacional correspondiente.

---

## Responsabilidad

Naked Prosthetics no asume ninguna responsabilidad en los siguientes casos:

- Dispositivo cuyo mantenimiento no se haya realizado como se indica en las instrucciones de uso.
- Dispositivo montado con componentes de otros fabricantes.
- Dispositivo utilizado en un entorno, situación o condiciones de uso distintos a los recomendados.

Si desea obtener más información, consulte [npdevices.com](http://npdevices.com).