

GripLock Finger™

Bruksanvisning
Klass 1-protes

PPF101 | Första generationen



Tillverkare



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Tillverkad i USA

Auktoriserad representant



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SVENSKA



Medicinteknisk
produkt

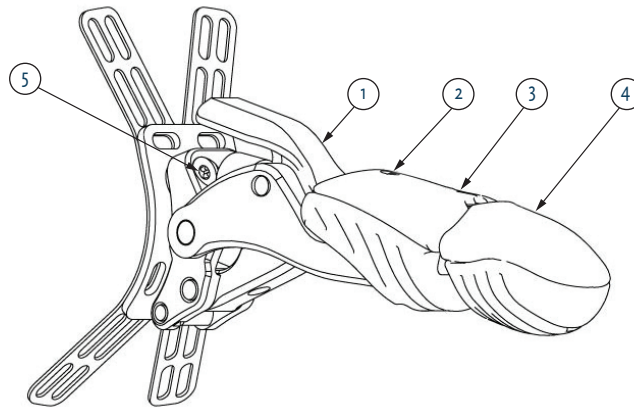


Bild: A

FÖRTECKNING ÖVER DELAR

Bild A:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------|
| ① Spärrhake (frigöringsspak) | ② Fästskruv för hölje | ③ P2-hölje |
| ④ GLF-topp | ⑤ Skruvar för förankringsfäste | |

PRODUKTBESKRIVNING

GripLock Finger är en passiv, låsande, mekanisk protes som syftar till att återställa handfunktionen hos patienter med fullständiga fingeramputationer eller medfödda anomalier. **GripLock Finger** ersätter fingrar som saknas så att användare kan återfå gripförmåga och funktionella greppmönster. Utöver att återställa kraftmotstånd och längd för de drabbade fingrarna hjälper det också till att skydda amputationsstället och motstå smärtsamma krafter i ändan av det återstående fingret. **GripLock Finger** fungerar som ett låsande mekaniskt finger som kan positioneras. När fingret har böjts finns det två metoder för att återföra det till dess neutrala position: (1) genom att trycka på spärrhaken på dorsalsidan (*bild A, 1*) på **GripLock Finger** eller (2) genom att böja **GripLock Finger** ända tills återställningspositionen nås och sedan låta den frigöra. **GripLock Finger** är avsedd att användas tillsammans med ett måttillverkat fäste och passas in på patienten av en certifierad ortopedingenjör.

Användningsrekommendationer

Vid användning av **GripLock Finger** rekommenderar vi att du successivt ökar användningen av protesen och inte börjar med att använda den på heltid. Detta hjälper till att förhindra överansträngningsskador i muskler som eventuellt har varit underanvända.

Arbetsterapi, rehabilitering eller handterapi rekommenderas efter att du har fått din protes för att stärka musklerna och få protesen att fungera optimalt.

Varning

- För patienter med hudkänslighet rekommenderar vi användning av **GripLock Finger** i den mån som deras hud tål det.
- Minska användningen av protesen om huden börjar rodna eller blir irriterad.
- Sluta använda protesen genast och kontakta din ortopedingenjör om rodnaden håller i sig eller vid obehag.


Allvarliga tillbud ska rapporteras till Naked Prosthetics och lämpliga statliga myndigheter där användaren och/eller patienten är baserad.

Underhåll av protesen

- GripLock Finger är vattentät, smuts-, kemikalie- och värmeresistent och byggd för att användas.
- Långvarig kontakt med starka lösningsmedel kan skada målade ytor.
- Regelbundet arbete med avfettningsmedel kan försämra smörjningen av gångjärnslederna.
- Kontakta din ortopedingenjör för service eller utbyte av komponenter.
- För att säkerställa lång livslängd för GripLock Finger, applicera en livsmedelsgodkänd tunn mineralolja på följande ställen:

Bild B:

- ① Fjäder
- ② Spärrhakens kontaktyta
- ③ Spärrhakens gångjärnsled
- ④ Tänder

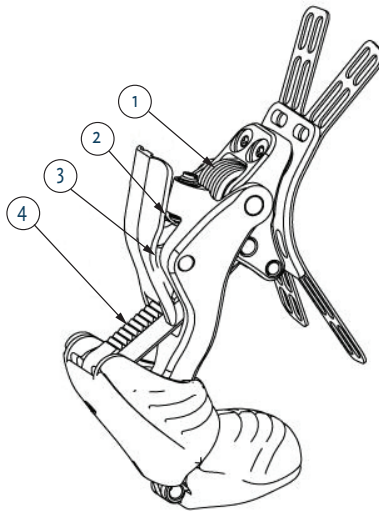

* *NOTERA: Av säkerhetsskäl ska gångjärnslederna endast tas isär av protestillverkaren.*

Skötsel och rengöring

- Långvarig kontakt med starka lösningsmedel kan skada målade ytor och försämra smörjningen hos gångjärnslederna.
- Skölj med sötvatten efter användning i saltvatten.
- Rengör protesen med varmt vatten och mildt rengöringsmedel enligt behov. Torka den varsamt eller låt den lufttorka.
- Rengör och ta bort smuts eller orenheter på protesen med en gammal tandborste eller tryckluft.
- Maskintvätta INTE protesen och lägg den INTE i en torktumlare.

Garanti

Naked Prosthetics ger en 1-årig standardgaranti (från leveransdatumet) på den mekaniska funktionen hos GripLock Finger. Kontakta Naked Prosthetics för ytterligare förlängda garantialternativ.

Ändringar i prestanda

Om det sker ändringar i hur en protes presterar, sluta då alltid använda protesen ifråga och kontakta din klinik.



Varning: Använd inte protesen om kontakt mellan protesen och patientens hud orsakar smärta, överdrivna skrubbsår eller blödningar.

Rapportering av allvarliga tillbud

Alla allvarliga tillbud avseende enheten ska rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter.

Kassering

Enheten och förpackningen ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella miljöbestämmelser.

Ansvarsskyldighet

Naked Prosthetics tar inte ansvar för följande:

- Enheten har inte underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Enheten har monterats med komponenter från andra tillverkare.
- Rekommendationer för användningsförhållanden, tillämpning eller omgivning för enheten har inte efterlevts.

För mer information: besök npdevices.com