

## MCPDriver™

Brugsanvisning  
Kropsstyret, klasse 1 protese  
BPF 202 | Anden generation



**Producent**



**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Fremstillet i USA

**Autoriseret repræsentant**





**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

DANSK



Medicinsk udstyr

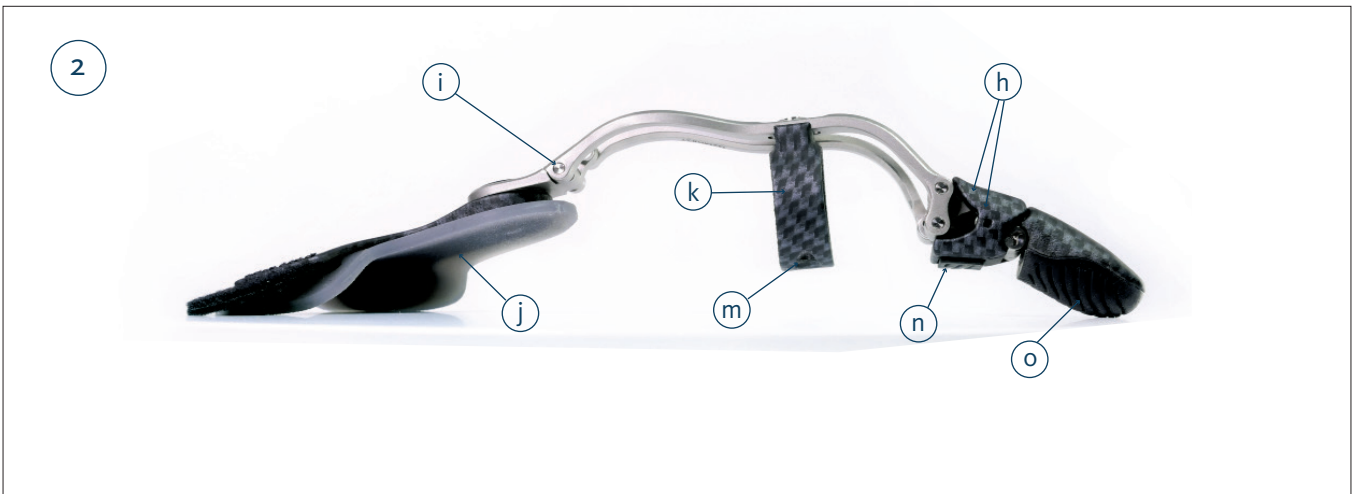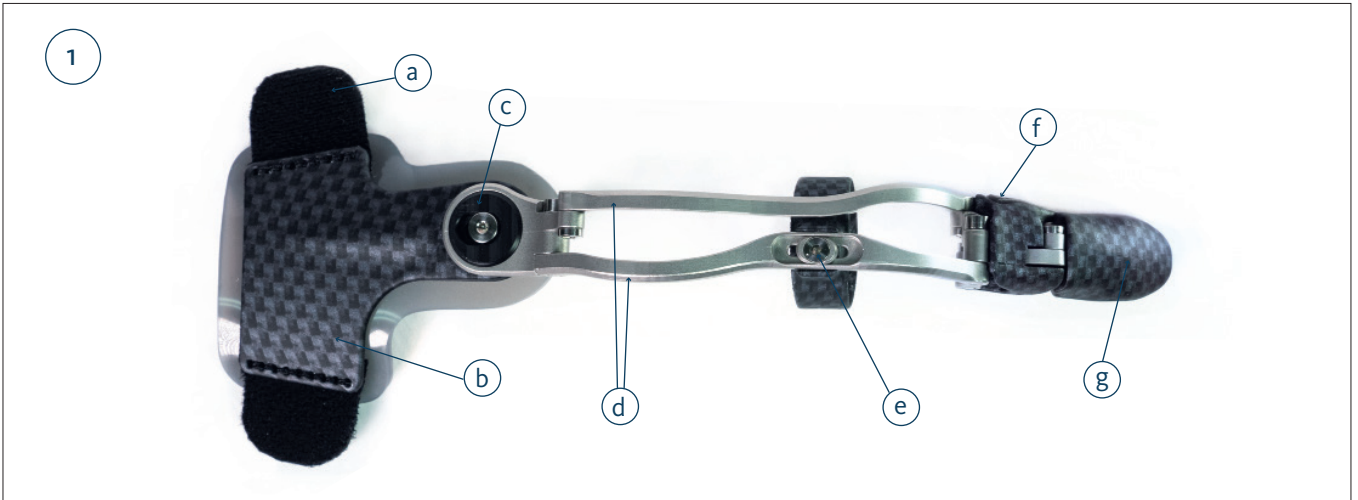

## LISTE OVER DELE

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Remtilbehør                | h. P2-beklædning             |
| b. Brugertilpasset bagplade   | i. Hængsel                   |
| c. Abduktions-/adduktionskive | j. Dorsalt silikoneinterface |
| d. Brugertilpassede metalled  | k. Suspensionsring           |
| e. Ringjusteringsskrue        | m. Ringmellemlægshul         |
| f. P2 lateral pude            | n. Silikonepude              |
| g. Enhedsspids                | o. Silikonespids             |

## PRODUKTBESKRIVELSE

MCPDriver er en kropsstyret mekanisk protese, der har til formål at genoprette håndfunktionen hos patienter med partielle fingeramputationer. Protesen genetablerer fingerfærdigheden, styrken og længden på den berørte finger, og den følger også fingerens naturlige bevægelse. Den hjælper med at beskytte amputationsstedet og modstår overdreven udstrækning i fingeren. MCPDriver udnytter brugerens resterende fingerstyrke og -bevægelse til at artikulere to kunstige distale fingerknogler og give robust modstand for gendannelse af en funktionel finger.

## Anvendelse af enheden

1. Åbn MCP-bagpladerremmen, og placer enheden på den berørte hånd og finger.
  - Juster hængselleddet (*del i*) lige over eller lidt bag MCP-leddet (*knoen*).
  - Abduktions-/adduktionsskiven (*del c*) skal være 12.7 mm – 1.90 mm ( $\frac{1}{2}$ " –  $\frac{3}{4}$ "") bag (dvs. tættere på håndleddet midten af det anatomiske MCP-led).
2. Placer den installerede suspensionsring (*del k*) på den resterende finger, og kontrollér den oprindelige pasform.
  - Suspensionsringen skal passe løst, så ringen kan glide langs den resterende finger under bøjning og udstrækning.
  - Kortere restfingre kan have gavn af en tætsiddende pasform eller silikonemellemlæg for at hjælpe med at opfange bevægelsesområdet.
  - BEMÆRK: *Suspensionsringen må aldrig "kvæle" den resterende finger.*
3. Spænd remmen i bunden af hånden.
  - Denne skal sidde strammere på fingrene end en urrem.

**\*BEMÆRK:** Hvis du oplever periodisk volumenændring, kan du tilføje eller fjerne mellemlæg eller ændre din ringstørrelse efter behov.

## Anbefalinger for brug

- Når du bruger MCPDriver, anbefales det gradvist at vænne sig til fuldtidsbrug. Dette vil bidrage til at forhindre skader i muskler der måske ikke er blevet udnyttet optimalt indtil dette tidspunkt.
- Erhvervs-, rehabiliterings- eller håndterapi anbefales, efter at du har modtaget enheden til muskelforstærkning og optimal funktion af enheden.

## Forsigtig

- For patienter med følsomhed anbefales det at bruge MCPDriver, iht. hvordan den tolereres.
- Hvis der opstår rødme på huden, skal du reducere brugen af enheden.
- Hvis der opstår rødme eller ubehag, skal du straks stoppe brugen af enheden og kontakte din protesetekniker.

**\*VIGTIG BEMÆRKNING:** Ingen del af metallet må nogensinde påvirke din hud, og enheden må heller aldrig kollideres med enden af din finger. Hvis disse hændelser finder sted, skal du straks stoppe brugen af enheden og kontakte din protesetekniker.

Alvorlige hændelser skal indberettes til Naked Prosthetics og relevante offentlige myndigheder, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

## Enhedsvedligeholdelse

- MCPDriver er vandtæt, bestandig over for snavs, kemikalier og varme og bygget til brug.
- Regelmæssigt arbejde med affedtningsmidler kan fjerne smørelsen fra hængslerne. Påfør om nødvendigt en let, mineralisk olie, der er sikker at anvende som fødevarer på hængselstederne.
- Kontakt din protesetekniker for service eller udskiftning af komponenter.

**\*BEMÆRK:** Af sikkerhedsmæssige årsager må hængsler kun demonteres af enhedsfabrikanten.

## Vedligeholdelse og rengøring

- Langvarig udsættelse for stærke opløsningsmidler kan beskadige lakerede overflader og fjerne smørelse på hængsler.
- Skyl med ferskvand efter brug i saltvand.
- Rengør enheden med varmt vand og mildt rengøringsmiddel efter behov. Dup forsigtigt enheden tør, eller lad den lufttørre.
- Fjern snavs eller skidt fra enheden ved hjælp af en gammel tandbørste eller trykluft, hvis det ønskes.
- **Må IKKE maskinvaskes. Må IKKE tørres i tørretumbler.**

**\*BEMÆRK:** Remkomponenter absorberer vand og tager længere tid at tørre end resten af enheden eller systemet.

## Tilbehør til enheden (inkluderet)

Udover MCPDriver er følgende inkluderet for at hjælpe med at optimere enhedens pasform:

- Ekstra håndledsrem
- Suspensionsring i en størrelse, der er større end den oprindelige størrelse
- Suspensionsring i en størrelse, der er mindre end den oprindelige størrelse
- Lille mellemlæg – LM
- Medium mellemlæg – MM
- Stort mellemlæg – SM
- En (1) 1.58 mm (1/16") unbrakonøgle

## Garanti

Naked Prosthetics tilbyder som standard 1 års garanti (fra afsendelsesdatoen) på MCPDriver-enhedens mekaniske funktion. Kontakt Naked Prosthetics for yderligere muligheder for udvidet garanti.

## Indberetning af alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med apparatet skal indberettes til fabrikanten og de relevante myndigheder.

## Bortskaffelse

Udstyret og emballagen skal bortskaffes i henhold til gældende lokal eller national miljølovgivning.

## Ansvar

Naked Prosthetics fraskriver sig ethvert ansvar, hvis:

- udstyret ikke er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med brugsanvisningen
- udstyret er blevet kombineret med dele fra andre fabrikanter
- udstyret er blevet brugt uden for anbefalet brugstilstand, anvendelse eller område.

Få mere at vide på [npdevices.com](http://npdevices.com)