

MCPDriver™

Bruksanvisning
Kroppsstyrt, klasse 1 proteseenhet
BPF 202 | Andre generasjon



Produsent



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Produsert i USA

Autorisert representant





EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

NORSK



Medisinsk utstyr

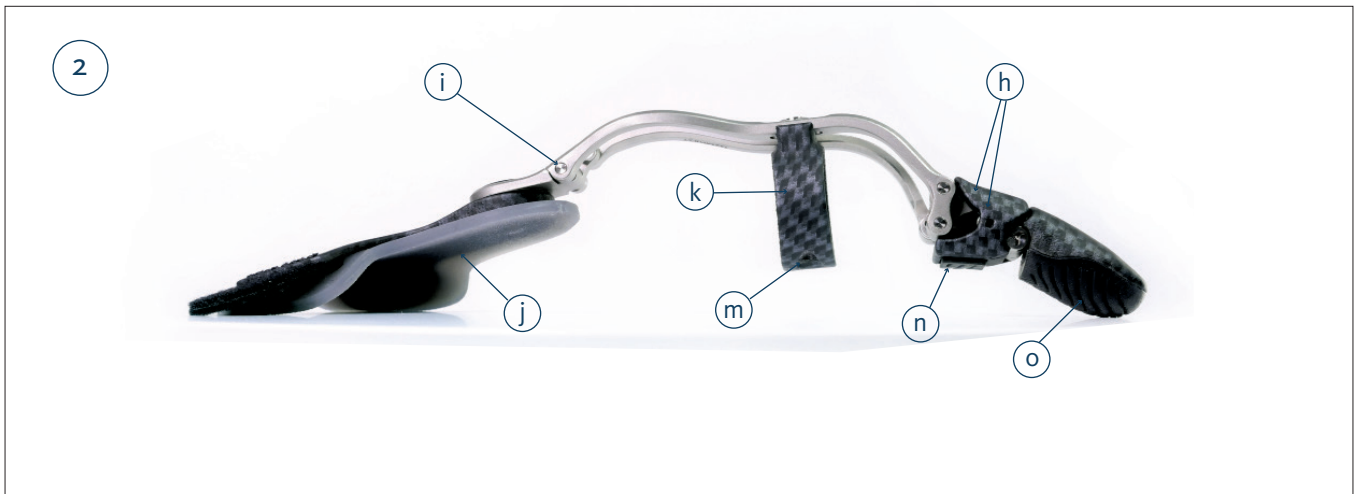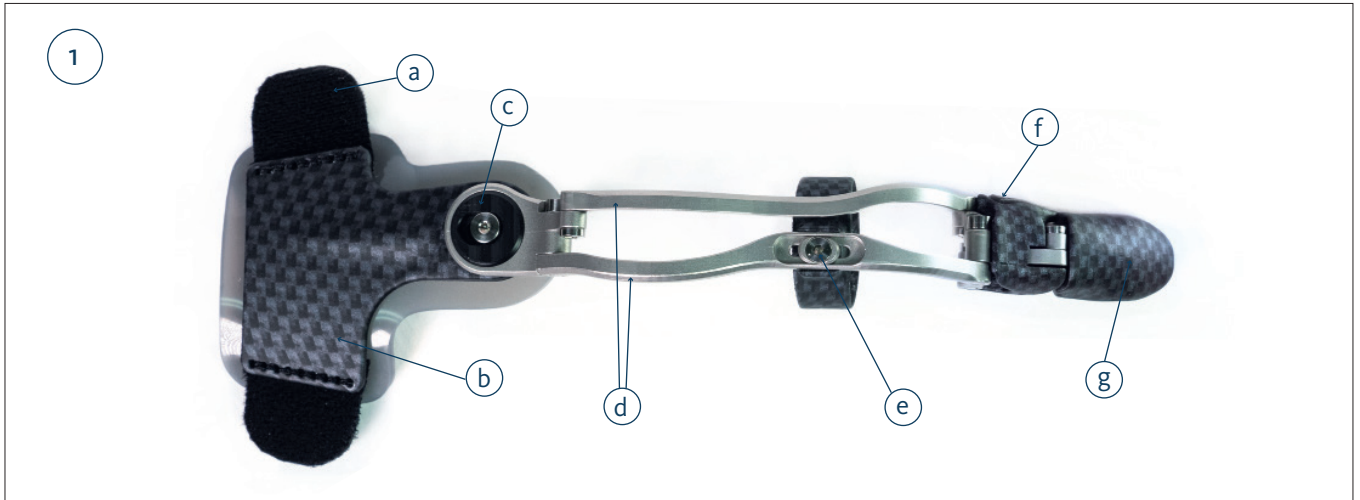

LISTE MED DELER

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a. Remfester | h. P2 føring |
| b. Tilpasset bakplate | i. Hengselledd |
| c. Abduksjons-/adduksjonsskive | j. Dorsal silikonkontaktflate |
| d. Måltilpassede fingerbøyer | k. Fingerring |
| e. Ringjusteringsskrue | m. Mellomleggshull for ring |
| f. P2 lateral pute | n. Silikonpute |
| g. Enhetstupp | o. Silikontupp |

PRODUKTBESKRIVELSE

MCPDriver er en kroppsstyrt mekanisk protese som tar sikte på å gjenopprette håndfunksjonen til brukere med delvise fingeramputasjoner. Gjenoppretter fingerferdighet, kraft og lengde til den berørte fingeren, den følger også den naturlige abduksjonen av fingeren, hjelper til med å beskytte amputasjonsområdet og motstå hyperekstensjon i fingeren. MCPDriver benytter seg av brukerens gjenværende fingerstyrke og bevegelse til å artikulere to kunstige endeled for gjenopprettelsen av en funksjonell finger.

Bruk av enhet

1. Åpne MCP Backplate-remen, og plasser enheten på den berørte hånden og fingeren.
 - Rett inn hengsleddet (*element i*) direkte over eller litt bak MCP-leddet (*knoke*).
 - Abduksjons-/adduksjonsskiven (*element c*) bør være 12,7 mm – 1,90 mm ($\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ ") bak (dvs. nærmere håndleddet) senter av det anatomiske MCP-leddet.
2. Plasser den installerte fingerringen (*element k*) på den resterende fingeren, og kontroller passform.
 - Fingerringen bør sitte løst, noe som gjør at ringen kan gli langs den resterende fingeren under fleksjon og ekstensjon.
 - Kortere resterende fingre kan dra nytte av en mer tettsluttende passform eller et silikonmellomlegg for å fange opp bevegelsesområde.
 - MERK: Fingerringen bør aldri "kvele" den resterende fingeren.
3. Fest stroppen ved foten av hånden.
 - Denne bør sitte nærmere fingrene enn en klokkerem ville sittet.

* MERK: Hvis du opplever volumendringer med jevne mellomrom, kan du legge til eller fjerne mellomleggene eller endre ringstørrelse etter behov.

Anbefalinger for bruk

- Ved bruk av MCPDriver anbefales en gradvis oppbygging til fulltidsbruk. Dette vil bidra til å forhindre overbruksskader i muskler som kan ha vært brukt for lite frem til dette punktet.
- Yrkes-, rehabiliterings- eller håndterapi er anbefalt etter å ha mottatt enheten for muskelstyrking og optimal enhetsfunksjon.

Forsiktig

- For pasienter med sensitivitet anbefales det å bruke MCPDriver som tolerert.
- Hvis rødhet vises på huden din, må du redusere bruken av enheten din.
- Hvis rødhet vedvarer eller ubehag oppstår, stopp bruken av enheten umiddelbart og kontakt ortopediteknikerens din.

*VIKTIG MERKNAD: Ingen del av metallet skal på noe som helst tidspunkt treffe huden din, og enheten skal heller ikke krasje inn i enden av stumpe din på noe tidspunkt – hvis dette skjer, må du avslutte bruken av enheten umiddelbart og kontakte ortopediteknikerens din.

Alvorlige hendelser bør rapporteres til Naked Prosthetics og passende offentlige myndigheter der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Vedlikehold av enhet

- MCPDriver er vannsikker, skitt-, kjemikalie- og varmebestandig og bygget for bruk.
- Regelmessig arbeid med avfettingsmidler kan fjerne smøring fra hengsler. Om nødvendig, påfør en matsikker, lett mineralolje på hengselstedene.
- Kontakt ortopediteknikerens din for vedlikehold eller utskifting av komponenter.

* MERK: Av sikkerhetsmessige årsaker bør hengsler kun demonteres av enhetsprodusenten.

Vedlikehold og rengjøring

- Langvarig eksponering for sterke løsemidler kan skade malte overflater og fjerne smøringen på hengslene.
- Skyll med ferskvann etter bruk i saltvann.
- Rengjør enheten med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel etter behov. Tørk forsiktig eller lufttørk.
- Fjern smuss eller skitt fra enheten med en gammel tannbørste eller trykkluft hvis det er ønskelig.
- **IKKE maskinvask. IKKE plasser i tørketrommel.**

* **MERK:** Remkomponenter vil absorbere vann og bruke lengre tid på å tørke enn resten av enheten eller systemet.

Enhetstilbehør (inkludert)

I tillegg til MCPDriver er følgende inkludert for å bidra til en optimal passform på enheten:

- Ekstra håndleddsstropp
- Fingerring som er større enn den opprinnelige størrelsen
- Fingerring som er mindre enn den opprinnelige størrelsen
- Lite mellomlegg – L
- Medium mellomlegg – M
- Stort mellomlegg – S
- En (1) 1,58 mm (1/16") sekskantnøkkel

Garanti

Naked Prosthetics tilbyr en standard 1-års garanti (fra forsendelsesdato) på den mekaniske funksjonen til MCPDriver. Kontakt Naked Prosthetics for ekstra, utvidede garantialternativer.

Rapportering om alvorlig hendelse

Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.

Avhending

Enheten og emballasjen må avhendes i henhold til respektive lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Ansvar

Naked Prosthetics påtar seg ikke ansvar for følgende:

- Enheter som ikke er vedlikeholdt som instruert i bruksanvisningen.
- Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
- Enheter som er brukt utenfor anbefalt brukstilstand, applikasjon eller miljø

For mer informasjon: [besøk npdevices.com](https://www.npdevices.com)