

PIPDriver™

Kasutusjuhend
Kehaga juhitud 1. klassi protees
BPF 201 | Teine põlvkond



Tootja



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Toodetud Ameerika Ühendriikides

Volitatud esindaja




EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EESTI KEEL



Meditsiiniseade

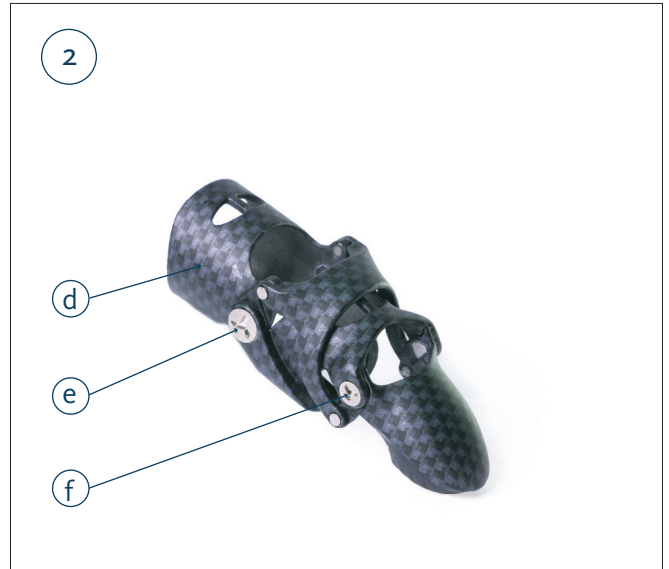

OSADE LOEND

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. K une kuju (pildil loomulik kuju) | g. Silikoonist ots |
| b. Raami dorsaalne tugiplaadiauk | h. Liigendiklamber |
| c. R nga dorsaalne tugiplaadiauk | i. Raami palmaarne tugiplaadiauk |
| d. R ngas | j. R nga palmaarne tugiplaadiauk |
| e. Suur liigendikruvi | k. Raam (dorsaalne ja palmaarne) |
| f. V ike liigendikruvi | |

TOOTE KIRJELDUS

PIPDriver on kehaga juhitav mehaaniline protees, mille eesmärk on taastada käe funktsioon sõrme osalise amputatsiooniga patsientidel. Iga seade kohandatakse konkreetse patsiendi suuruse, pikkuse ja liikumisulatus järgi. Seade taastab kahjustatud sõrme osavuse, jõu ja pikkuse, samuti aitab see kaitsta amputatsioonikohta ja kaitseb sõrme hüperekstensiooni eest.

PIPDriver™ rakendab kasutaja allesjäänud sõrme jõudu ja liikumist, et kunstliku distaalse sõrmelüli liigendi abil taastada sõrme funktsionaalsus.

Seadme kasutamine

1. Asetage seade kahjustatud sõrmele. Rõnga siseküljele on kleebitud sõrme tuvastamise kleebis, mis hõlbustab identifitseerimist.
2. Joondage suur liigendikruvi (*punkt e*) sõrme PIP-liigese (*keskmine sõrmenukk*) juurde või sellest veidi tahapoole
3. Kontrollige esialgset sobivust
 - Rõngas (*punkt d*) peab sobima tihedalt nagu abielusõrmus
 - Raputage kätt ettevaatlikult allapoole veendumaks, et seade püsib sõrme küljes
 - Kui seade on lõdvalt, paigaldage nelja kohta (*punktid b, c, i ja j*) vajaduse kohaselt silikoonist tugiplaadid
 - Kui tuvastate pilu sõrme allesjäänud osa ümber, lisage vajaduse korral tugiplaate
4. Liigutage seadet mitu korda, kontrollides nõuetekohast painutamist ja sirutamist
 - Kui seade ei liigu täielikult välja, suurendage raami dorsaalse tugiplaadi asukohas tugiplaati (*punkt b*)

* **MÄRKUS.** Kui teie käe ümbermõõt muutub, võite vajaduse korral igas kohas lisada või eemaldada tugiplaate.

Soovitused kasutamise kohta

- PIPDriveri kasutamisel on soovitatav pidevale kasutamisele üle minna järk-järgult. See aitab vältida ülekoormusest tingitud vigastusi lihastes, mida seni ei kasutatud piisavalt.
- Lihaste tugevdamiseks ja seadme optimaalseks toimimiseks on pärast seadme kättesaamist soovitatav viia läbi ergo-, rehabilitatsiooni- või käeteraapia.

Hoiatus

- Tundlikel patsientidel on soovitatav kasutada PIPDriverit taluvuse järgi.
- Kui nahale tekib punetus, vähendage seadme kasutamist.
- Kui punetus püsib või tekib ebamugavustunne, lõpetage kohe seadme kasutamine ja võtke ühendust oma proteesitehnikuga.

Tõsistest vahejuhtumitest tuleb teavitada Naked Prostheticsit ning kasutaja ja/või patsiendi asukohaks oleva liikmesriigi pädevat asutust.

Seadme hooldus

- PIPDriver on välja töötatud selliselt, et see vajab minimaalset hooldust ja korrashoidu.
- PIPDriver ei vaja määrimist.
- PIPDriver on vee-, mustuse-, kemikaali- ja kuumakindel ning valmistatud kasutamiseks.
- Võtke ühendust oma proteesitehnikuga, kui vajate hooldust või täiendavaid silikoonist tugiplate.

* **MÄRKUS.** Turvalisuse huvides tohib liigendeid lahti võtta ainult seadme tootja.

Hooldus ja puhastamine

- Pikaajaline kokkupuude tugevate lahustitega võib kahjustada värvitud pindu.
- Pärast soolases vees kasutamist loputage mageda veega.
- Puhastage seadet vajaduse korral sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Tupsutage kuivaks või laske õhu käes kuivada.
- Puhastage seade mustusest ja prügist vana hambaharja või soovi korral suruõhu abil.
- **MITTE** pesta masinas; **MITTE** kasutada kuivatit.

Seadme tarvikud (kuuluvad tarnekomplekti)

Lisaks PIPDriverile on kaasas täielik komplekt tugiplate, mis aitavad seadme sobivust optimeerida.

- Väike tugiplate – VT
- Keskmine tugiplate – KT
- Suur tugiplate – ST

Garantii

Naked Prosthetics annab PIPDriveri mehaanilisele toimivusele 1-aastase standardgarantii (alates tarnekuupäevast). Lisagarantii saamiseks võtke ühendust Naked Prosthetics Devicesiga.

Tõsisest vahejuhtumist teatamine

Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ja asjaomastele ametiasutustele.

Kasutuselt kõrvaldamine

Seade ja pakend tuleb kasutuselt kõrvaldada kohalike või riiklike keskkonnanäeskirjade järgi.

Vastutus

Naked Prosthetics ei vastuta järgmiste asjaolude eest:

- seadet ei ole hooldatud kasutusjuhendi kohaselt
- seade on kokku pandud teiste tootjate komponentidega
- seadet kasutades ei ole järgitud soovitatavaid kasutustingimusi, rakendust või keskkonda

Lisateavet vaadake aadressil: npdevices.com