

PIPDriver™

Gebrauchsanweisung
Körpergesteuerte Prothese der Klasse 1
BPF 201 | Zweite Generation



Hersteller



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Hergestellt in den USA

EU-Bevollmächtigter




EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

DEUTSCH



Medizinprodukt

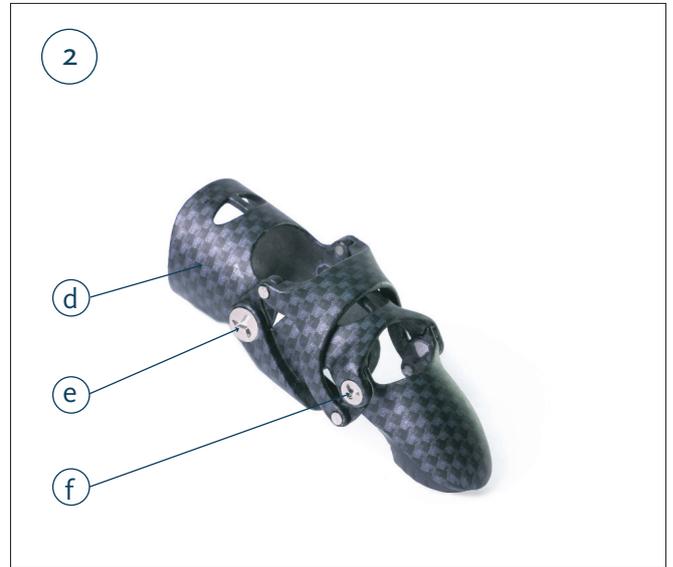

LISTE DER KOMponentEN

- | | |
|--|--|
| a. Nagel (organische Nachbildung) | g. Silikonspitze |
| b. Dorsaler Halt (Gegenhalt) – Schlitz für Passscheibe | h. Spannglied |
| c. Dorsaler Ring – Schlitz für Passscheibe | i. Palmarer Halt – Schlitz für Passscheibe |
| d. Ring | j. Palmarer Ring – Schlitz für Passscheibe |
| e. Großer Verschluss | k. Cage (dorsal und palmar) |
| f. Kleiner Verschluss | |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PIPDriver ist eine mechanische Fingerprothese, die vom Körper gesteuert wird und die Handfunktion von Patienten mit teilweise amputierten Fingern wieder herstellt. Jede Prothese wird individuell auf die Größe, die Länge und den Bewegungsbereich des Patienten abgestimmt, wodurch die Fingerfertigkeit, Kraft und Länge des betroffenen Fingers wieder hergestellt werden. Außerdem schützt sie die Amputationsstelle und verhindert eine Überstreckung des Fingers. Beim PIPDriver wird die verbleibende Kraft und Beweglichkeit des Fingers eingesetzt, um ein künstliches Fingerendglied zu artikulieren und einen funktionsfähigen Finger herzustellen.

Anwendung der Prothese

1. **Setzen Sie die Prothese auf den entsprechenden Finger. Zur leichteren Identifizierung befindet sich auf der Innenseite des Rings ein Aufkleber mit dem entsprechenden Finger.**
2. **Richten Sie den großen Verschluss (*Element e*) am oder etwas hinter dem PIP-Gelenk (*Mittelknöchel*) des Fingers aus.**
3. **Prüfen Sie den Sitz.**
 - Der Ring (*Element d*) sollte eng anliegen (wie ein Ehering).
 - Schütteln Sie vorsichtig Ihre Hand, um sicherzustellen, dass die Prothese am Finger bleibt.
 - Wenn die Prothese zu locker sitzt, fügen Sie eine beliebige Kombination von Silikonpassscheiben an den entsprechenden vier Stellen (*Elemente b, c, i und j*) ein.
 - Wenn Sie einen Spalt um den Fingerstumpf feststellen, setzen Sie nach Bedarf Passscheiben ein.
4. **Bewegen Sie die Prothese mehrmals und überprüfen Sie dabei die korrekte Beugung und Streckung.**
 - Wenn keine vollständige Streckung möglich ist, verwenden Sie eine größere Passscheibe an der entsprechenden Position des dorsalen Halts (*Element b*).

*** HINWEIS:** Wenn sich die Dicke des Fingers regelmäßig verändert, können Sie je nach Bedarf die Passscheiben an den entsprechenden Stellen einsetzen oder entfernen.

Empfehlungen für die Anwendung

- Zur Eingewöhnung an den PIPDriver wird empfohlen, die Tragedauer allmählich bis zur dauerhaften Verwendung zu erhöhen. Dadurch verhindern Sie Überlastungsverletzungen in Muskeln, die bisher möglicherweise nicht häufig beansprucht wurden.
- Nach Erhalt der Prothese wird zur Muskelstärkung und optimalen Funktion der Prothese eine Ergo-, Rehabilitations- oder Handtherapie empfohlen.

Vorsicht

- Empfindsame Patienten sollten den PIPDriver nur so lange tragen, wie sie es vertragen.
- Wenn Hautrötungen auftreten, reduzieren Sie die Anwendung bzw. die Tragedauer der Prothese.
- Wenn die Rötung anhält oder Beschwerden auftreten, nehmen Sie die Prothese sofort ab und tragen Sie sie nicht mehr. Wenden Sie sich an Ihren Orthopädietechniker.

Schwerwiegende Ereignisse müssen Naked Prosthetics und den zuständigen Behörden des Landes, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Wartung der Prothese

- Das Design der PIPDriver-Prothese erfordert eine minimale Wartung und Pflege.
- Der PIPDriver muss nicht gefettet werden.
- Der PIPDriver ist wasserdicht, schmutz-, chemikalien- und hitzebeständig und für das Tragen konzipiert.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung bei der Wartung oder zum Kauf zusätzlicher Silikonpassscheiben an Ihren Orthopädietechniker.

* **HINWEIS:** *Scharniere dürfen aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller der Prothese demontiert werden.*

Pflege und Reinigung

- Längerer Kontakt mit starken Lösungsmitteln kann zu Schäden an den lackierten Oberflächen führen.
 - Spülen Sie die Prothese mit klarem Wasser ab, wenn sie in Salzwasser getragen wurde.
 - Reinigen Sie die Prothese bei Bedarf mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Prothese an der Luft trocknen oder tupfen Sie sie mit einem Tuch trocken.
 - Entfernen Sie Schmutz gegebenenfalls mit einer alten Zahnbürste oder mit Druckluft von der Prothese.
 - **NICHT in der Spül- oder Waschmaschine reinigen; NICHT in den Trockner legen.**
-

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zusätzlich zum PIPDriver wird ein vollständiger Satz Passscheiben mitgeliefert, um einen optimalen Sitz der Prothese zu erzielen:

- Kleine Passscheibe – K
 - Mittlere Passscheibe – M
 - Große Passscheibe – G
-

Gewährleistung

Naked Prosthetics bietet eine einjährige Standardgarantie (ab Datum des Versands) auf die mechanische Funktion der PIPDriver-Prothese.

Bitte wenden Sie sich an Naked Prosthetics, wenn Sie Informationen zu zusätzlichen, erweiterten Garantieoptionen erhalten möchten.

Meldung schwerwiegender Ereignisse

Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und den zuständigen Behörden gemeldet werden.

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackung müssen gemäß den geltenden lokalen oder nationalen Umweltvorschriften entsorgt werden.

Haftung

Naked Prosthetics übernimmt keine Haftung, wenn:

- das Produkt nicht gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung gewartet wird.
- das Produkt mit Komponenten anderer Hersteller montiert wird.
- das Produkt nicht gemäß den empfohlenen Anwendungsbedingungen oder nicht für die empfohlene Anwendung bzw. Umgebung verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter npdevices.com