

## PIPDriver™

Bruksanvisning  
Kroppsstyrt, klasse 1 proteseenhet  
BPF 201 | Andre generasjon



**Produsent**



**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Produsert i USA

**Autorisert representant**




**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

NORSK



Medisinsk utstyr

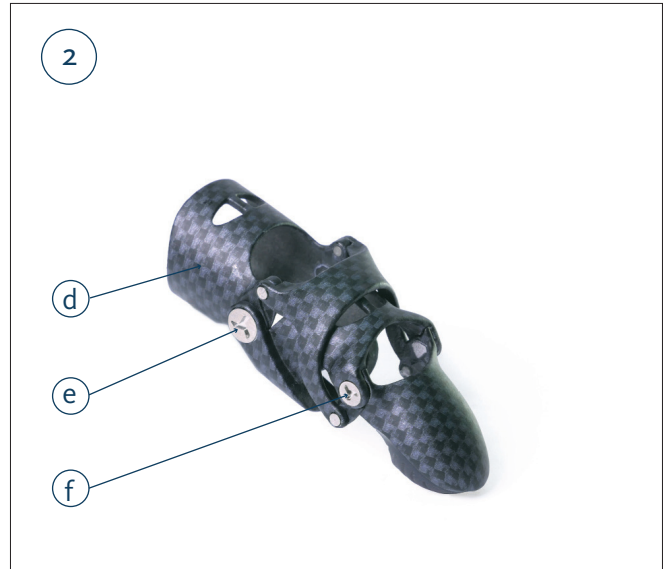

**LISTE MED DELER**

- a. Naglestil (organisk avbildet)
- b. Dorsal cage mellomleggshull
- c. Dorsal mellomleggshull for ring
- d. Ring
- e. Stort feste
- f. Lite feste
- g. Silikontupp
- h. Sene
- i. Palmar cage mellomleggshull
- j. Palmar mellomleggshull for ring
- k. Cage (dorsal og palmar)

## PRODUKTBESKRIVELSE

PIPDriver er en kroppsstyrt mekanisk protese som tar sikte på å gjenopprette håndfunksjonen til pasienter med delvise fingeramputasjoner. Hver enhet er tilpasset en spesifikk pasients størrelse, lengde og bevegelsesområde. Gjenoppretter fingerferdighet, kraft og lengde til den berørte fingeren og hjelper også til med å beskytte amputasjonsstedet og motstå hyperekstensjon i fingeren. PIPDriver™ benytter seg av brukerens gjenværende fingerstyrke og -bevegelse til å artikulere en kunstig distal falanks for gjenopprettelsen av en funksjonell finger.

## Bruk av enhet

1. Plasser enheten på den berørte fingeren. Et fingeridentifiserende klistremerke festes på innsiden av ringen for enkel identifikasjon.
2. Innrett det store festet (*element e*) etter eller litt bak PIP-leddet (*midtre knoke*) til fingeren
3. Kontroller passform
  - Ringen (*element d*) bør sitte like godt som en giftering
  - Rist hånden forsiktig opp-ned for å påse at enheten blir værende på fingeren
  - Hvis enheten er løs, prøv å installere en kombinasjon av silikonmellomlegg på de fire stedene (*elementene b, c, i og j*)
  - Hvis det er gap omkring den resterende fingeren, legg til mellomlegg etter behov
4. Artikuler enheten flere ganger, og kontroller for riktig fleksjon og ekstensjon
  - Hvis enheten ikke forlenges helt, øk mellomleggsstørrelsen på dorsal cage-stedet (*element b*)

\* **MERK:** Hvis du opplever volumendringer med jevne mellomrom, kan du legge til eller fjerne mellomleggene på alle stedene etter behov.

## Anbefalinger for bruk

- Ved bruk av PIPDriver anbefales en gradvis oppbygging til fulltidsbruk. Dette vil bidra til å forhindre overbruksskader i muskler som kan ha vært brukt for lite frem til dette punktet.
- Yrkes-, rehabiliterings- eller håndterapi er anbefalt etter å ha mottatt enheten for muskelstyrking og optimal enhetsfunksjon.

## Forsiktig

- For pasienter med sensitivitet anbefales det å bruke PIPDriver som tolerert.
- Hvis rødhet vises på huden din, må du redusere bruken av enheten din.
- Hvis rødhet vedvarer eller ubehag oppstår, stopp bruken av enheten umiddelbart og kontakt ortopediteknikeren din.

Alvorlige hendelser bør rapporteres til Naked Prosthetics og passende offentlige myndigheter der brukeren og/eller pasienten er etablert.

## Vedlikehold av enhet

- PIPDriver er designet for minimum vedlikehold og pleie.
- PIPDriver krever ikke smøring.
- PIPDriver er vannsikker, skitt-, kjemikalie- og varmebestandig og bygget for bruk.
- Kontakt ortopediteknikeren din for vedlikehold eller for flere silikonmellomlegg.

\* **MERK:** Av sikkerhetsmessige årsaker bør hengsler kun demonteres av enhetsprodusenten.

## Vedlikehold og rengjøring

- Langvarig eksponering for sterke løsemidler kan skade malte overflater.
- Skyll med ferskvann etter bruk i saltvann.
- Rengjør enheten med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel etter behov. Tørk forsiktig eller lufttørk.
- Fjern smuss eller skitt fra enheten med en gammel tannbørste eller trykkluft hvis det er ønskelig.
- **IKKE maskinvask. IKKE plasser i tørketrommel.**

## Tilbehør ved enhet (inkludert)

I tillegg til PIPDriver er det inkludert et helt sett med mellomlegg for å bidra til en optimal passform på enheten:

- Lite mellomlegg – L
- Medium mellomlegg – M
- Stort mellomlegg – S

## Garanti

Naked Prosthetics tilbyr en standard 1-års garanti (fra forsendelsesdato) på den mekaniske funksjonen til PIPDriver. Kontakt Naked Prosthetics Devices for ekstra, utvidede garantialternativer.

## Rapportering om alvorlig hendelse

Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten skal rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.

## Avhending

Enheten og emballasjen må avhendes i henhold til respektive lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

## Ansvar

Naked Prosthetics påtar seg ikke ansvar for følgende:

- Enheter som ikke er vedlikeholdt som instruert i bruksanvisningen.
- Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
- Enheter som er brukt utenfor anbefalt brukstilstand, applikasjon eller miljø

For mer informasjon: [besøk npdevices.com](https://www.npdevices.com)