

PIPDriver™

Instruções de utilização
Dispositivo protético de classe 1, acionado pelo corpo
BPF 201 | Segunda geração



Fabricante



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
Fabricado nos EUA

Representante autorizado




EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

PORTUGUÊS



Dispositivo médico

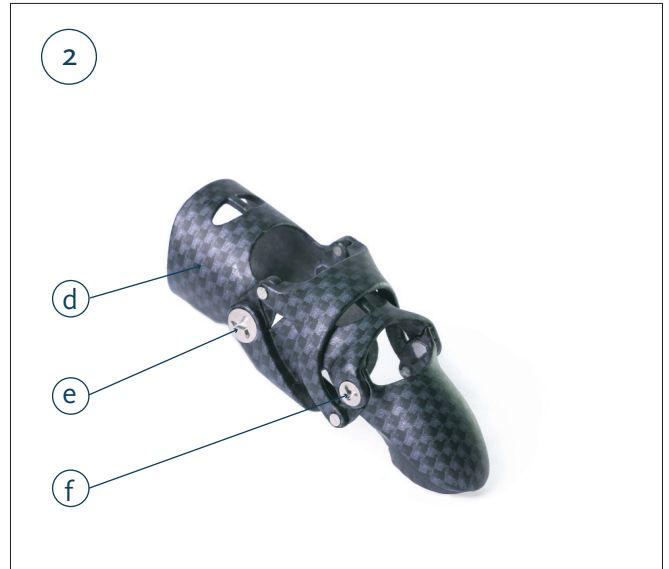

LISTA DE PEÇAS

- a. Estilo de unha (estilo orgânico na imagem)
- b. Orifício de calço da estrutura dorsal
- c. Orifício de calço do anel dorsal
- d. Anel
- e. Parafuso grande
- f. Parafuso pequeno
- g. Ponta de silicone
- h. Tendão
- i. Orifício de calço da estrutura palmar
- j. Orifício de calço do anel palmar
- k. Estrutura (dorsal e palmar)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O PIPDriver é uma prótese mecânica acionada pelo corpo que visa restaurar a função da mão no caso de pacientes com amputações parciais de dedos. Cada dispositivo é personalizado para o tamanho, comprimento e amplitude de movimentos de um paciente específico. Para além de restaurar a dexteridade, a força e o comprimento do dedo afetado, também ajuda a proteger o local de amputação e resiste à hiperextensão do dedo. O PIPDriver™ utiliza o movimento e força do dedo residual do utilizador para articular uma falange distal artificial, com vista à recuperação de um dedo funcional.

Aplicação do dispositivo

1. Coloque o dispositivo no dedo afetado. Para uma identificação simplificada, existe um autocolante com a identificação do dedo no interior do anel.
2. Coloque o parafuso grande (*item e*) alinhado ou ligeiramente atrás da articulação PIP (*nó médio*) do dedo.
3. Verifique o encaixe inicial.
 - O anel (*item d*) deve encaixar como uma aliança
 - Agite suavemente a mão em posição invertida para garantir que o dispositivo permanece no dedo
 - Se o dispositivo estiver solto, instale qualquer combinação de calços de silicone nos quatro locais (*itens b, c, i, j*)
 - Caso exista espaço em redor do dedo residual, adicione calços conforme necessário
4. Articule o dispositivo várias vezes, verificando se a flexão e a extensão estão corretas.
 - Se o dispositivo não alcançar a extensão completa, aumente o tamanho do calço no local do calço da estrutura dorsal (*item b*)

* **NOTA:** em caso de alteração periódica do volume, poderá adicionar ou remover os calços em qualquer local conforme necessário.

Recomendações de utilização

- Recomenda-se uma utilização gradual do PIPDriver, até à passagem a tempo inteiro. Isto permite evitar ferimentos musculares decorrentes do excesso de utilização, visto que os músculos poderão encontrar-se num estado de subutilização.
- Após receber o seu dispositivo, recomendamos que efetue terapia à mão, ocupacional ou de reabilitação para o fortalecimento muscular e funcionamento ideal do dispositivo.

Aviso

- No caso de pacientes com sensibilidade, recomenda-se a utilização do PIPDriver conforme tolerado.
- Caso surja vermelhidão cutânea, reduza a utilização do dispositivo
- Se a vermelhidão persistir ou caso sofra desconforto, interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e contacte o seu médico.

Quaisquer incidentes graves deverão ser comunicados à Naked Prosthetics e às autoridades governamentais responsáveis no local onde o utilizador e/ou paciente se encontra.

Manutenção do dispositivo

- O PIPDriver foi concebido para necessitar de manutenção e cuidados mínimos.
- O PIPDriver não requer lubrificação.
- O PIPDriver é à prova de água, resistente a poeiras, a produtos químicos e ao calor e foi concebido para utilização.
- Contacte o seu médico com vista à manutenção ou para obter calços de silicone adicionais.

* **NOTA:** *por questões de segurança, as dobradiças apenas devem ser desmontadas pelo fabricante do dispositivo.*

Cuidados e limpeza

- A exposição prolongada a solventes fortes poderá danificar as superfícies pintadas.
- Enxaguar com água doce após utilização em água salgada.
- Limpar o dispositivo com água morna e detergente suave conforme necessário. Secar com um pano ou deixar secar naturalmente.
- Limpar a sujidade ou resíduos do dispositivo com uma escova de dentes velha ou ar, se desejado.
- **NÃO colocar na máquina de lavar; NÃO colocar na máquina de secar.**

Acessórios do dispositivo (Incluídos)

Para além do PIPDriver, está incluído um conjunto completo de calços para ajudar a otimizar o encaixe do dispositivo:

- Calço pequeno – P
- Calço médio – M
- Calço grande – G

Garantia

A Naked Prosthetics oferece uma garantia padrão de 1 ano (a partir da data de envio) ao nível da função mecânica do PIPDriver. Contacte a Naked Prosthetics Devices para consultar opções adicionais de garantia alargada.

Comunicação de incidente grave

Quaisquer incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades relevantes.

Eliminação

O dispositivo e os materiais de embalagem devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos ambientais locais ou nacionais em vigor.

Responsabilidade

A Naked Prosthetics não assume qualquer responsabilidade nos seguintes casos:

- Manutenção do dispositivo não efetuada conforme indicado nas instruções de utilização.
- Dispositivo montado com componentes de outros fabricantes.
- Dispositivo utilizado fora da condição, aplicação ou ambiente recomendados.

Para obter mais informações: [aceda a npdevices.com](http://aceda.a npdevices.com)