

## PIPDriver™

Instrucciones de uso  
Dispositivo protésico de clase 1 impulsado por el cuerpo  
BPF 201 | Segunda generación



**Fabricante**



**Naked Prosthetics**  
408 Olympia Ave NE  
Olympia, WA 98501  
USA  
+1 (360) 915-9724  
Fabricado en Estados Unidos

**Representante autorizado**




**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ESPAÑOL



Dispositivo médico

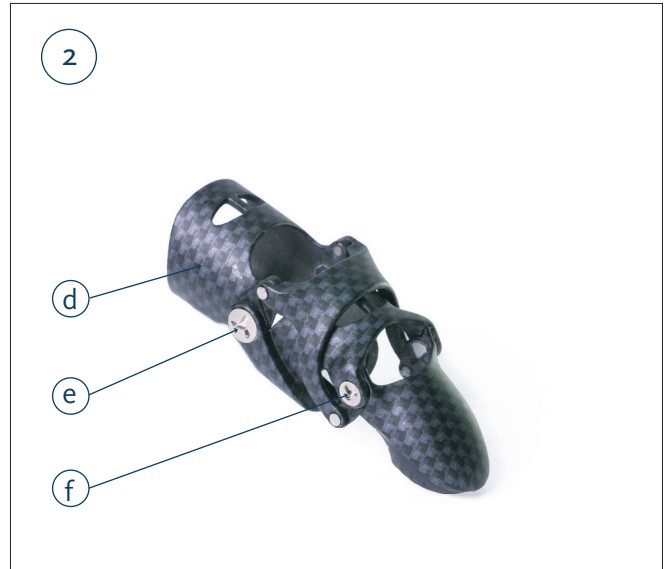

**LISTA DE PIEZAS**

- a. Estilo de uñas (imagen orgánica)
- b. Orificio del calce del armazón dorsal
- c. Orificio del calce del anillo dorsal
- d. Anillo
- e. Fijación grande
- f. Fijación pequeña
- g. Punta de silicona
- h. Tendón
- i. Orificio del calce del armazón palmar
- j. Orificio del calce del anillo palmar
- k. Armazón (dorsal y palmar)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIPDriver es una prótesis mecánica impulsada por el cuerpo que pretende devolver la función de la mano a pacientes con amputaciones parciales de los dedos. Cada dispositivo se adapta al tamaño, la longitud y la amplitud de movimiento de cada paciente. Al restaurar la destreza, la fuerza y la longitud del dedo afectado, también ayuda a proteger el lugar de la amputación y a resistir la hiperextensión del mismo. PIPDriver™ aprovecha la fuerza y el movimiento residuales del dedo del usuario para articular una falange distal artificial y recuperar la funcionalidad del dedo.

## Colocación del dispositivo

1. Coloque el dispositivo en el dedo afectado. En el interior del anillo se adhiere una pegatina identificativa del dedo para facilitar su correcta identificación.
2. Alinee la fijación grande (*elemento e*) con o ligeramente por detrás de la articulación PIP (*nudillo medio*) del dedo.
3. Compruebe el ajuste inicial.
  - El anillo (*elemento d*) debe ajustarse perfectamente, como una alianza de boda.
  - Agite suavemente la mano boca abajo para asegurarse de que el dispositivo permanece en el dedo.
  - Si el dispositivo está flojo, instale cualquier combinación de calces de silicona en los cuatro puntos (*elementos b, c, i y j*)
  - Si se observa holgura alrededor del dedo residual, añada calces en la medida necesaria.
4. Articule el dispositivo varias veces, comprobando la correcta flexión y extensión.
  - Si el dispositivo no se extiende completamente, aumente el tamaño del calce en la ubicación del calce del armazón dorsal (*elemento b*)

\* **NOTA:** *si experimenta cambios periódicos de volumen, puede añadir o quitar los calces en cualquiera de los puntos, en la medida en que sea necesario.*

## Recomendaciones de uso

- Al utilizar PIPDriver, se recomienda llegar gradualmente al uso a tiempo completo. De este modo se evitarán lesiones provocadas por un uso excesivo en músculos que hasta ese momento podían haberse utilizado de forma insuficiente.
- Se recomienda realizar terapia ocupacional, de rehabilitación o manual después de recibir su dispositivo con el fin de fortalecer los músculos y conseguir un funcionamiento óptimo del mismo.

## Precaución

- En el caso de pacientes con sensibilidad, se recomienda utilizar PIPDriver en la medida de su tolerancia.
- Si se produce un enrojecimiento en la piel, reduzca el uso del dispositivo.
- Si persiste el enrojecimiento o aparecen molestias, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con su técnico ortopédico.

*Cualquier incidente de carácter grave debe ser comunicado a Naked Prosthetics y a las autoridades gubernamentales competentes del lugar en el que resida la persona usuaria y/o paciente.*

## Mantenimiento del dispositivo

- PIPDriver está diseñado para un mantenimiento y cuidado mínimos.
- PIPDriver no requiere lubricación.
- PIPDriver es impermeable, resistente a la suciedad, a los productos químicos y al calor, y está diseñado para ser utilizado.
- Póngase en contacto con su técnico ortopédico para facilitar el mantenimiento o para obtener calces de silicona adicionales.

\* **NOTA:** Por razones de seguridad, las bisagras únicamente deben ser desmontadas por el fabricante del dispositivo.

## Cuidado y limpieza

- La exposición prolongada a disolventes agresivos puede dañar las superficies pintadas.
- Después de utilizarlo en agua salada, enjuáguelo con agua dulce.
- Limpie el dispositivo con agua tibia y detergente suave cuando sea necesario. Séquelo con cuidado o con aire.
- Limpie la suciedad o el polvo del dispositivo utilizando un cepillo de dientes viejo o aire comprimido si lo desea.
- **NO se debe lavar a máquina NI meter en la secadora.**

## Accesorios del dispositivo (incluidos)

Además del dispositivo PIPDriver, se incluye un juego completo de calces para ayudar a optimizar el ajuste del dispositivo:

- Calce pequeño – P
- Calce medio – M
- Calce grande – G

## Garantía

Naked Prosthetics ofrece una garantía estándar de 1 año (a partir de la fecha de envío) sobre el funcionamiento mecánico de PIPDriver. Póngase en contacto con Naked Prosthetics Devices para obtener información sobre otras opciones de garantía ampliada.

## Notificación de incidentes graves

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a las autoridades pertinentes.

## Eliminación

El dispositivo y el embalaje deben eliminarse con arreglo a la normativa medioambiental local o nacional correspondiente.

## Responsabilidad

Naked Prosthetics no asume ninguna responsabilidad en los siguientes casos:

- Dispositivo cuyo mantenimiento no se haya realizado como se indica en las instrucciones de uso.
- Dispositivo montado con componentes de otros fabricantes.
- Dispositivo utilizado en un entorno, situación o condiciones de uso distintos a los recomendados.

Si desea obtener más información, consulte [npdevices.com](http://npdevices.com).