

PIPDriver™

Kullanım Talimatı
Vücut Tahrikli, Sınıf 1 Protez Cihaz
BPF 201 | İkinci Nesil



Üretici



Naked Prosthetics
408 Olympia Ave NE
Olympia, WA 98501
USA
+1 (360) 915-9724
ABD'de üretilmiştir

Yetkili Temsilci





EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

TÜRKÇE



Tıbbi Cihaz

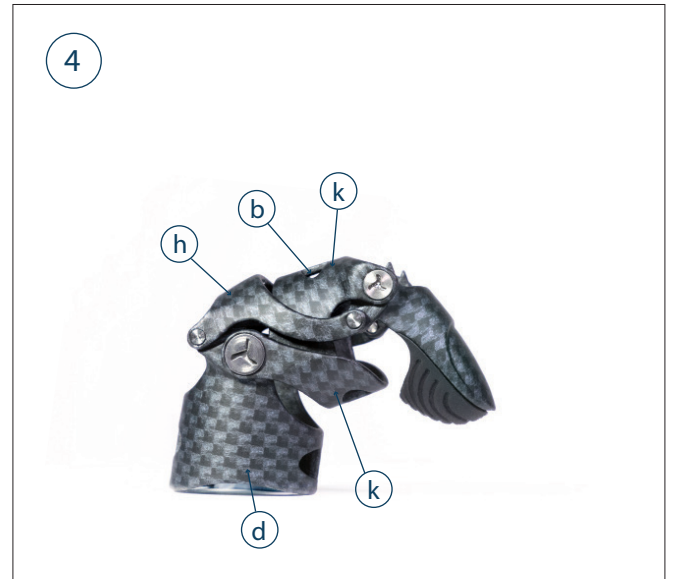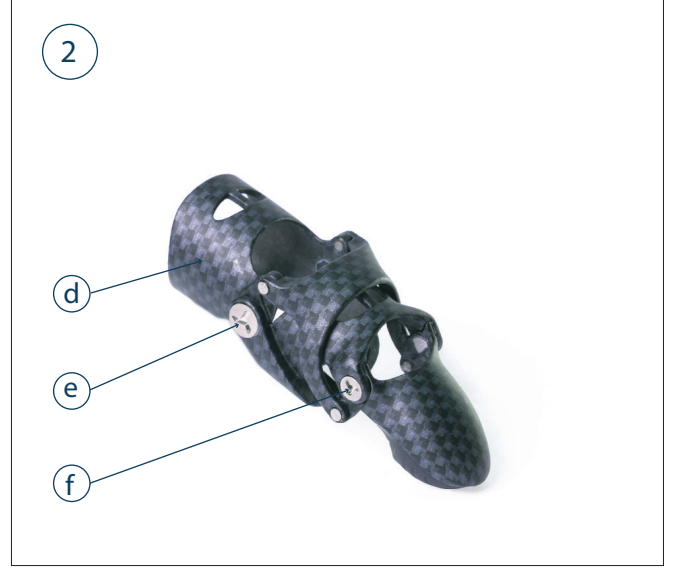

PARÇA LİSTESİ

- a. Tırnak Stili (Organik resimli)
- b. Dorsal Kafes Şim Deliği
- c. Dorsal Halka Şim Deliği
- d. Halka
- e. Büyük Bağlantı Elemanı
- f. Küçük Bağlantı Elemanı
- g. Silikon Uç
- h. Tendon
- i. Palmar Kafes Şim Deliği
- j. Palmar Halka Şim Deliği
- k. Kafes (Dorsal ve Palmer)

ÜRÜN TANIMI

PIPDriver, kısmi parmak amputasyonu olan hastalara el fonksiyonlarını geri kazandırmayı amaçlayan vücut tahrikli mekanik bir protezdür. Her cihaz belirli bir hastanın ölçüsü, uzunluğu ve hareket aralığı için özelleştirilmiştir. Etkilenen parmağın el becerisini, gücünü ve uzunluğunu geri kazandırır, ayrıca amputasyon bölgesinin korunmasına yardımcı olur ve parmaktaki hiperekstansiyona direnç gösterir. PIPDriver, yapay bir distal falanksi eklemek ve fonksiyonel bir başparmağın yeniden yapılandırılması için kullanıcının rezidüel parmak gücünü ve hareketini kullanır.

Cihaz Uygulaması

- Cihazı etkilenen parmağın üzerine yerleştirin.** Kolay tanımlama için halkanın iç kısmına sayı tanımlayıcı bir etiket yapıştırılmıştır.
- Büyük bağlantı parçasını (e ögesi) parmağın PIP eklemi (orta boğum) ile veya biraz arkasında hizalayın**
- İlk uyumu kontrol edin**
 - Halka (d ögesi) bir alyans gibi tam oturmalıdır
 - Cihazın parmağınızda kaldığından emin olmak için elinizi hafifçe aşağı yukarı sallayın
 - Cihaz gevşekse dört konuma herhangi bir silikon şim kombinasyonu takın (b, c, i ve j ögeleri)
 - Rezidüel parmak etrafında boşluk fark edilirse gerektiği kadar şim ekleyin
- Uygun fleksiyon ve ekstansiyonu kontrol ederek cihazı birkaç kez döndürün**
 - Cihaz tam olarak uzamıyorsa dorsal kafes şim konumundaki şim boyutunu artırın (b ögesi)

***NOT:** periyodik hacim değişikliği yaşarsanız şimleri gerektiğinde herhangi bir yere ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz..

Kullanım Önerileri

- PIPDriver'ı kullanırken kademeli olarak tam zamanlı kullanıma geçilmesi tavsiye edilir. Bu, bu noktaya kadar az kullanılmış olabilecek kaslarda aşırı kullanım yaralanmalarının önlenmesine yardımcı olacaktır.
- Cihazınızı aldıktan sonra kasların güçlendirilmesi ve cihazın en iyi şekilde çalışması için ergoterapi, rehabilitasyon veya el terapisi önerilir.

Dikkat

- Hassasiyeti olan hastalar için PIPDriver'ın tolere edildiği şekilde kullanılması önerilir.
- Cildinizde kızarıklık oluşursa cihazınızın kullanımını azaltın
- Kızarıklık devam ederse veya rahatsızlık ortaya çıkarsa cihazın kullanımını derhâl durdurun ve protez uzmanınıza başvurun.

Ciddi vakalar Naked Prosthetics'e ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu uygun devlet makamlarına bildirilmelidir.

Cihaz Bakımı

- PIPDriver minimum bakım ve onarım için tasarlanmıştır.
- PIPDriver yağlama gerektirmez.
- PIPDriver su geçirmez, kire, kimyasallara ve ısıya dayanıklıdır ve kullanım için üretilmiştir.
- Servis veya ek silikon şimler için protez uzmanınızla iletişime geçin.

***NOT:** Güvenlik nedeniyle menteşeler sadece cihaz üreticisi tarafından sökülmelidir.

Bakım ve Temizlik

- Güçlü solventlere uzun süre maruz kalmak boyalı yüzeylere zarar verebilir.
- Tuzlu suda kullandıktan sonra musluk suyu ile durulayın.
- Cihazı gerektiğinde ılık su ve yumuşak deterjanla temizleyin. Hafifçe vurarak veya havayla kurutun.
- İsterseniz eski bir diş fırçası veya basınçlı hava kullanarak cihazdaki kiri veya pisliği temizleyebilirsiniz.
- **Makinede YIKAMAYIN; Kurutma makinesine YERLEŞTİRMEYİN.**

Cihaz Aksesuarları (Dâhil)

PIPDriver'a ek olarak cihazın uyumunu optimize etmeye yardımcı olmak için eksiksiz bir şim seti dâhil edilmiştir:

- Küçük şim – K
- Orta şim – O
- Büyük şim – B

Garanti

Naked Prosthetics, PIPDriver'ın mekanik işlevi için standart 1 yıllık garanti (sevkiyat tarihinden itibaren) sunar.

Ek, uzatılmış garanti seçenekleri için lütfen Naked Prosthetics ile iletişime geçin.

Ciddi Olay Raporu

Cihazla ilgili herhangi bir ciddi olay üreticiye ve ilgili makamlara bildirilmelidir.

Bertaraf Etme

Cihaz ve ambalajı, ilgili yerel veya ulusal çevre yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Yükümlülük

Naked Prosthetics aşağıdakiler için yükümlülük kabul etmez:

- Cihazın bakımının kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde yapılmaması.
- Diğer üreticilerin parçalarıyla birleştirilmiş cihaz.
- Cihazın önerilen kullanım koşulları, uygulama veya ortam dışında kullanılması

Daha fazla bilgi için: npdevices.com adresini ziyaret edin